

ekaSoft / antidecubitus- og plejemadras.

August 2015 – Vare Gr. 5



Nyhed!

HMI NR: 73380 - Dimension 80 x 12 x 200cm.
HMI Nr.: 85416 - Dimension 83 x 12 x 200cm.
HMI NR: 73384 - Dimension 90 x 12 x 200cm.
HMI NR: 73385 - Dimension 100 x 12 x 200cm.

- **Indsættelse: Personvægt fra 15 op til ca. 50kg.**
- **Anvendes til personer med tryksår i kategori I – III i henhold til EPUAP's og NPUAP's definitioner og til forebyggelse og behandling af tryksår til personer med lav til høj risiko fx efter Norton eller Braden skalaen, under forudsætning af at EPUAP's og NPUAP's retningslinjer følges.**
- **Fremragende liggekomfort til personer med meget lav BMI. Særdeles velegnet til personer med mange smerter.**
- **Helmadras i sandwich konstruktion m/2-sidet skjult lynlås (overlap) + bærehåndtag.**
- **Madrassvægt fra ca. 8 til 10kg afhængig af madrass dimensionen.**
- **MRSA resistent bi- elastisk, 2- vejs strækbart Økotex standard 100 – klasse 1 godkendt, åndbart, brandhæmmende PU inkontinens betræk. Overlap på lynlåsene reducerer indtrængning af støvmider.**
- **Betrækket er vaskbar ved 95 °. Gængse rengørings- og desinfektions midler uden alkohol, tensider og jod kan anvendes, eller aftørres med specielle rengørings- og desinfektions servietter fra Surcon. Betrækket kan tumbles ved lave grader.**
- **PU betrækket overholder kravene i henhold til EN 597- 1 & 2 (brandhæmmende).**
- **Min. 5 års fabriksgaranti på selve skummet.**
- **CE mærket i henhold til medicinsk udstyr (Klasse 1).**

Skumkerne.

Helmadrassen (kombinationsmadrassen) består øverst af 8cm. *Pur Balance*® viskoelastisk PUR skum i allerbedste kvalitet (ensartet op skummet) og underst 4cm. høj kvalitets HR PUR koldskum.

Betræk.


Betrækket er på overfladen fremstillet i et åndbart bi- elastisk PU – materiale. Lynlåsene med overlap begrænser indtrængning af væsker og støvmider i selve madrassen. Betrækket er allergitestet. For at forbedre håndtering af madrassen er der monteret 2 håndtag på den ene madrass- langside. PU- betrækket kan rengøres med gængse rengørings- og desinfektions midler eller servietter uden indhold af alkohol, tensider og jod. Betrækket kan vaskes ved 95° C. og tumbles ved lave grader.

NB: ekaSoft kan fås i speciel mål!

VEND >

FSA - trykmålinger:

ekaSoft - tryksårs madras.

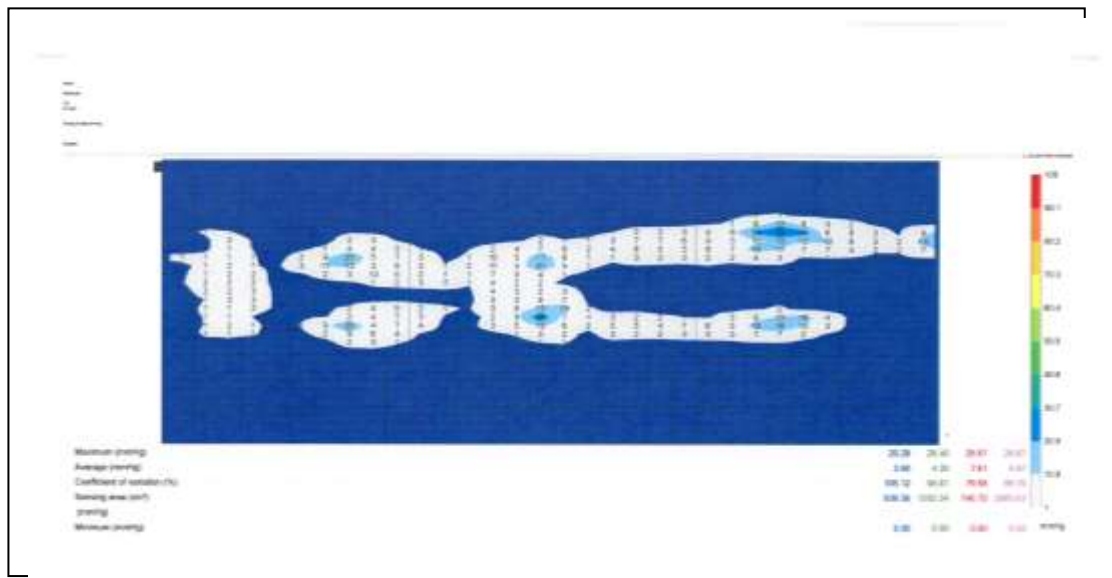

Standard HR 38kg/m³

